



Contrairement aux autres produits de lustrage, BisCover LV peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur de la bouche pour compléter les restaurations directes, indirectes et provisoires.

BisCover LV est une résine dont la formulation à faible viscosité et photopolymérisable est utilisée pour sceller la surface des restaurations et obtenir une surface lisse / lustrée. Sa formule chimique unique et exclusive fait en sorte que BisCover LV se polymérise sans produire de couche collante inhibée par l'oxygène. Grâce à BisCover LV, le polissage manuel peut être réduit ou n'est pas nécessaire. La formule chimique unique de BisCover LV peut être polymérisée à l'aide de DEL (LED), PAC et de lampe de photopolymérisation halogène.

• **BISCOVER LV**

Trousse de départ : 1 bouteille de poli-liquide à faible viscosité (3 ml), 1 seringue Uni-Etch avec BAC (5 g), les accessoires, les instructions ainsi que la fiche signalétique du fournisseur

• **Bouteille de recharge BISCOVER LV (3 ml)**

FORMULE AMÉLIORÉE

Peut désormais être photopolymérisé à l'aide de lampes DEL et halogènes !

CARACTÉRISTIQUES

- Photopolymérisable sans la présence d'une couche d'oxygène inhibée par l'air
- Polissage manuel réduit ou n'est pas nécessaire
- Sert de scellant de surface sur les restaurations en composite ou donne de la brillance aux matériaux provisoires
- Faible épaisseur du film
- Faible abrasion

AVANTAGES

- Produit une surface très brillante
- Réduit le temps passé au fauteuil
- Augmente la résistance à l'abrasion, prévient les attaques microbiennes et les taches
- Aucun ajustement occlusal nécessaire
- Durée de vie pouvant atteindre 3 ans sur les surfaces antérieures

+ MATÉRIAUX COMPLÉMENTAIRES



Agents de mordantage BISCO

Uni-Etch (32%), Etch37 (37%) régulier ou avec BAC




AELITE COMPOSITE

AESTHETIC ENAMEL / ALL-PURPOSE BODY
LS POSTERIOR / LS PACKABLE


MODE D'EMPLOI




15 **Étape n°1.**
Mordancer pendant 15 secondes.

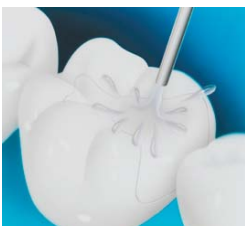

Étape n°2.
Rincer abondamment.

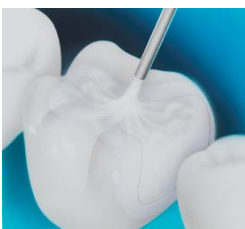

Étape n°3.
Sécher soigneusement à l'air.

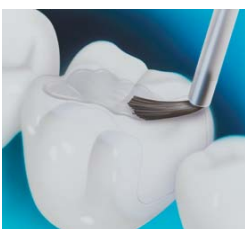

Étape n°4.
Appliquer BISCOVER LV
(une couche mince).



15 **Étape n°5.**
Faire une pause de 15
secondes pour permettre
l'évaporation du produit.

Ne pas amincir à l'air.



30 **Étape n°6.**
Photopolymériser pendant 30
secondes à l'aide d'une lampe
DEL ou halogène.

*Consulter le mode d'emploi pour
déterminer le temps de photopolymérisation
correspondant au type de lampe utilisé.

MODE D'UTILISATION

BisCover LV scelle et polit / lustre :

- A. Les restaurations en composite directes récentes
(polymérisées uniquement)
- B. Les restaurations en composite directes déjà en place
- C. Les restaurations provisoires
- D. Les verres ionomères modifiés à l'aide de résine
- E. L'émail avant ou après la mise en place des boîtiers
orthodontiques
- F. L'émail après un traitement de blanchiment des dents
- G. Les appareils en acrylique
- H. Les composites indirects